



# CATALOGO CATALOGUE

# DENTALSTORE 2011



**DENTALSTORE**

& Edizioni Lucisano S.r.l.

Via Padova, 355 - 20132 Milano Italy

Tel. 0039-2-27208383 Fax 0039-2-27209474

e-mail: [info@dentalstore.it](mailto:info@dentalstore.it) - [lucisano@centrocorsilucisano.com](mailto:lucisano@centrocorsilucisano.com)

<http://www.dentalstore.it>

*L'attuale didattica può fare riferimento non solo alla comunicazione per immagini, di cui Leonardo fu pioniere in campo anatomico, ma può ricorrere anche alla tridimensionalità toccata "con mano"; in buona sostanza, può avvalersi del modello anatomico dimostrativo, che riveste un ruolo di grande potenzialità informativa e formativa, grazie alla propria indubbia capacità di attrarre l'attenzione di chi sta apprendendo, offrendo nel contempo una chiarezza espositiva difficilmente riscontrabile, con altrettanta efficacia e spettacolarità, nella parola scritta o nella figura disegnata.*

# MANICHINI PER ESERCITAZIONI PRATICHE E ACCESSORI MANIKINS FOR PRACTICE AND ACCESSORIES



**DENTALSTORE**

& Edizioni Lucisano S.r.l.

Via Padova, 355 - 20132 Milano Italy

Tel. 0039-2-27208383 Fax 0039-2-27209474

e-mail: [info@dentalstore.it](mailto:info@dentalstore.it) - [lucisano@centrocorsilucisano.com](mailto:lucisano@centrocorsilucisano.com)

<http://www.dentalstore.it>



La continua ricerca ci ha portato a realizzare negli ultimi decenni soluzioni avanzate per la didattica chirurgica odontoiatrica in genere che si basano sull'utilizzo di riproduzioni la cui fedeltà alle strutture anatomiche è assicurata fino nei minimi particolari e nei quali viene garantita una piena rispondenza alla funzione.

Anche i nostri modelli di bocca hanno un aspetto morfologico e comportamenti funzionali analoghi a quelli anatomici e fisiologici delle strutture del corpo umano.

I manichini per esercitazioni odontoiatriche Dentalstore, montati su banchi da lavoro o fissati alla poltrona del riunito per mezzo di diversi dispositivi, costituiscono un sistema completo e una metodica, per molti aspetti innovativa, per la simulazione di ogni tipo di intervento che l'odontoiatra può eseguire sul paziente.

L'operatore riscontra, sui manichini e sui diversi modelli, le medesime difficoltà operative che affronterà sui futuri pazienti.

I manichini rappresentano inoltre delle vere e proprie cavie umane artificiali che, per mezzo della struttura metallica portante dotata di snodo, consentono di simulare i movimenti di lateralità, di rotazione e antero-posteriori della testa. Inoltre, grazie ai meccanismi presenti nell'articolatore metallico interno, consentono di emulare tutti i movimenti naturali della bocca, che può assumere tutte le posizioni anatomiche possibili (proiezione laterale, protrusione e retrusione), con regolazione dell'apertura della rima buccale da zero fino all'ampiezza massima, posizione nella quale può essere bloccata.



In the last decades continuous research has enabled us to elaborate advanced solutions in dental surgical didactics in general, which today are based on the use of devices where the accuracy of reproduction is absolute, even in the minute anatomical details, and the correspondence of functioning is respected.


Also our mouth models, have morphological patterns and functioning sections analogous to the anatomical and physiological ones of the human body structure.


The Dentalstore manikins for dental surgery practice, mounted on workbenches or fixed to mini-unit dental chair by means of different devices, represent a complete system and in many ways an innovative method to simulate every kind of operation that the dentist performs on the patient.

The operator finds, on the manikins and on the various models, the same operating difficulties he will face with patients.

The manikins are therefore actual artificial human cavies which, thanks to the internal bearing metallic structure equipped with joint, enable to simulate side movements, rotation movements and front- back movements of the head. Moreover the manikins, thanks to the devices placed in the internal metallic articulator, also enable to emulate all mouth natural movements, that can assume all possible anatomical stances (lateral projection, protrusion and retrusion), with regulation of the rima oris opening from zero to maximum excursion, in which stance it can be blocked.




 La libertà di movimento dell'asta che regge il manichino nei confronti dello snodo sferico consente di orientarla in quasi tutte le direzioni di un'emisfera: ciò ne permette il blocco nelle posizioni più ergonomiche, a seconda dell'altezza dell'operatore, dei modelli installati nel manichino e del tipo di attacco dello stesso alla postazione di lavoro.


 The freedom of movements of the rod supporting the manikin at level of the sphere joint enables to orientate it in almost all directions of an hemisphere: this allows its blockage in the most ergonomic stances, according to the operator's height, to the models assembled into the manikin and to the type of its junction at the workbench.


-  1. Simulazione di lavoro con paziente, posizione ore 12
- 2. Simulazione di lavoro con paziente, posizione ore 9

Già a livello di formazione bisogna abituarsi a una corretta postura affinché in seguito, nella professione, venga rispettata l'ergonomia dei movimenti.

-  1. Simulation of work with patient, position at 12
- 2. Simulation of work with patient, position at 9

Already during vocational training one must get acquainted with a correct posture in order to be able to keep the ergonomics of movements later on when working.

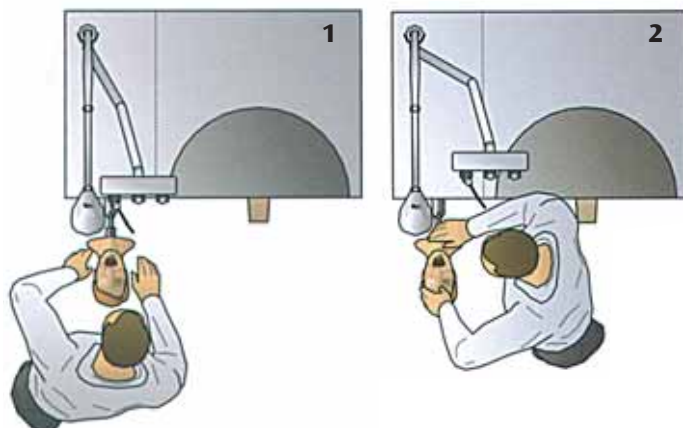

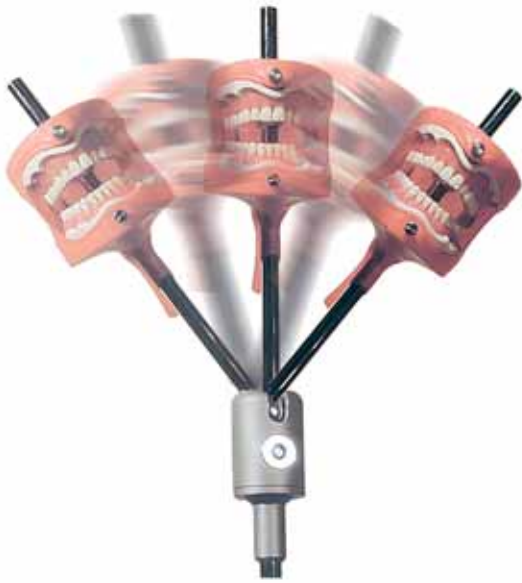

#### Manichino MODELLO ECONOMICO

È realizzato assemblando asta con snodo, occlusore in resina con basette portamodelli (Art. DS0946), gola di drenaggio in gomma (Art. DS0939). L'asta, grazie al giunto sferico, può ruotare a 360° e orientarsi, ripiegata di 90°, in posizione di riposo. Notevole la tenuta del serraggio del giunto snodato.

**Art. Cod. DS0951**

#### CHEAP TYPE manikin

Made by assembling jointed rod, resin occlusor with model-bearing supports (item code DS0946), gum draining throat (item code DS0939). Thanks to the spherical joint, the rod can carry out a 360° rotation and orientate itself, bent at 90°, in rest stance. The tightness of the joint clamping is particularly remarkable.

**Item code DS0951**



#### Manichino MODELLO STANDARD con maschera facciale autodrenante

Manichino costituito da asta con snodo, maschera facciale autodrenante, calotta cranica, articolatore metallico con blocco in posizione di massima apertura della bocca, lingua in materiale plastico.

In posizione di lavoro ruota di 360° sull'asse dell'asta e può essere reclinato di 90° in posizione di riposo. Tutti i componenti sono esenti dagli attacchi della ruggine.

**Art. Cod. DS0952**

#### STANDAR TYPE manikin with self- draining face mask

Manikin, with jointed rod, self- draining face mask, skullcap, metallic articulator with blockage in stance of maximum mouth opening, plastic gum tongue. When working it rotates by 360° on the rod axis and can be reclined by 90° in rest position. All components are rust proof.

**Item code DS0952**



#### Manichino MODELLO STANDARD CON BUSTO

Ampia libertà di movimento a livello dell'articolazione del collo e stabilità in qualsiasi posizione.


**Art. Cod. DS0953**

#### STANDARD TYPE manikin WITH BUST

Considerable freedom of movement at neck articulation level and stability in any stance.

**Item code DS0953**



 **Occlusore per manichino modello economico**

**Art. Cod. DS0946**

 **Occlusor for cheap type manikin**

**Item code DS0946**

 **Gola in lattice**

Per manichini modello economico e con supporto a pantografo

**Art. Cod. DS0939**

 **Latex throat**

Suitable for cheap type manikin and with pantograph support

**Item code DS0939**



 **Maschera facciale autodrenante per manichino modello standard**

L'acqua eventualmente immessa con la turbina all'interno della cavità buccale artificiale si deposita sul fondo della maschera facciale (nell'immagine montata sul busto) e da essa si allontana per caduta attraverso un tubicino, per raccogliersi in un apposito contenitore. L'interno della maschera facciale è accessibile per mezzo di una cerniera lampo impermeabile (nell'immagine montata sul busto).

**Art. Cod. DS0942**

 **Self- draining face mask for standard type manikin**

The water potentially put inside the artificial mouth cavity with the turbine, settles on the bottom of the face mask (in the photo assembled on the bust) and it falls through a small pipe, to collect separately in a suitable container. The inside of the face mask can be reached by a waterproof zip (in the picture mounted on the bust).

**Item code DS0942**



 **Lingua in gomma per tutti i tipi di manichino**

**Art. Cod. DS0940**

 **Gum tongue for all type of manikin**

**Item code DS0940**



 **Calotta cranica per manichino modello standard**

**Art. Cod. DS0941**

 **Skullcap for standard type on manikin**

**Item code DS0941**



 **Busto per manichino modello standard**

Fornito di struttura di sostegno.

**Art. Cod. DS1001**

 **Bust for standard type manikin**

With load bearing.

**Item code DS1001**

### Articolatore universale in metallo

1. Vite godronata per il serraggio sull'asta snodata.
2. Vite godronata per il serraggio della branca inferiore sull'asta snodata, nella posizione di massima apertura della bocca.
3. Vite godronata di regolazione e blocco delle posizioni di protrusione, e retrusione della bocca.
4. Grano per il serraggio, per la regolazione della distanza tra le due branche.
5. Vite di serraggio dell'emimodello superiore.
6. Vite di serraggio dell'emimodello inferiore.

**Art. Cod. DS0947**

### Metal universal articulator

1. Knurled screw for the clamping on the jointed rod.
2. Knurled screw for the clamping of the lower clutch on the jointed rod, in stance of maximum mouth opening.
3. Knurled regulation screw and blockage of protrusion stances and mouth retrusion.
4. Bead for the clamping, for the regulation of the distance of two jaws.
5. Knurled screw of the upper hemi- model.
6. Knurled screw of the lower hemi-model.

**Item code DS0947**



### Sull'articolatore universale è possibile fissare i modelli di bocca di altre case costruttrici.

Esso consente infatti la regolazione del posizionamento dei modelli sulle branche grazie all'asolatura dei fori di passaggio delle viti di serraggio e la libertà di scorrimento in direzione antero-posteriore secondo un angolo di Bennet medio.

### On the universal articulator, it is possible to fix the mouth models of other manufacturing firms.

It enables to regulate the placing of the models onto the jaws thanks to the edging of the holes which let the clamping screws pass, as well as the freedom of sliding to a front- side direction following a Bennet angle with mean value.




### Coppia di basette adattatrici in alluminio

**Art. Cod. DS0975**

### Couple of aluminium adapting supports

**Item code DS0975**

 L'utilizzo delle basette adattatrici consente sia l'applicazione sull'articolatore universale di modelli con caratteristiche di forma e aggancio particolari, sia l'applicazione dei modelli di nostra produzione ai manichini commercializzati da altre case produttrici.

 The use of the adapting supports enables, as better shown later on, both the application onto the universal articulator of models with particular shape and junction features, and the application of these models, manufactured by us, to the manikins commercialized by other manufacturing firms.





 **Manichino autodrenante con articolatore a slitta**


È costituito da una maschera facciale rigida, da una struttura metallica interna di sostegno e di funzionamento e da una maschera boccale in materiale plastico morbido con aggancio magnetico facilitato.


**Art. Cod. DS0954**

 **Self-draining manikin with sledge articulator**

It consists of a rigid face mask, of an internal metallic bearing and operating structure and of a soft plastic mouth mask with easy magnetic lock.

**Item code DS0954**

 **Disposizione dei magneti sulla parte esterna della maschera facciale rigida e sulla parte interna della maschera boccale morbida**

 **Placement of the magnets on the external side of the hard face mask and on the internal side of the soft mouth mask.**



 **Manichino autodrenante con articolatore a slitta e busto**

Il busto è disponibile nei colori nero, verde e color carne uguale alla maschera.

**Art. Cod. DS1002**

 **Self-draining manikin with sledge articulator and bust**

The bust is available in black and green colour or in the same flesh tone of the face mask.

**Item code DS1002**



 Grazie alla protusione dell'articolatore la sostituzione del modello di bocca è facilitata.

 Tanks to articulator protusion the replacement of the mouth model is allowed.

 **Manichino con supporto a pantografo in alluminio e sagoma superiore della maschera facciale in PVC trasparente**

Il manichino, provvisto di gola di drenaggio in lattice (art. cod. DS0939), è articolato su un supporto a pantografo in alluminio (art. cod. DS1005) dotato di un sistema di serraggio molto stabile. La sagoma superiore della maschera facciale (art. cod. DS1006), realizzata in PVC trasparente, e la maschera boccale inferiore in plastica elastica morbida (art. cod. DS1007) sono disponibili, unitamente alla gola in lattice e al supporto a pantografo, come ricambi. È possibile agganciare la struttura al banco di lavoro con l'attacco a flangia (art. cod. DS0955), l'attacco a morsetto sotto raffigurato (art. cod. DS1008), o agganciarla alla poltrona con l'apposito attacco (art. cod. DS0948).

L'articolatore interno, in fusione metallica, non consente i movimenti di lateralità ed è anch'esso disponibile come ricambio (art. cod. DS1009).

Idoneo per le esercitazioni su qualsiasi modello di bocca, ma particolarmente adatto per le esercitazioni delle igeniste dentali.

**Art. Cod. DS1004**

 **Manikin with aluminium pantograph support and with the upper shape of the face mask in transparent PVC**

The manikin, supplied with draining latex throat (Item code DS0939), is articulated on an aluminium pantograph support (Item code DS1005) equipped with a very firm tightening system. The shape of the face mask (Item code DS1006) made in transparent PVC and the lower mouth mask in soft elastic plastic (Item code DS1007) are available, together with the latex throat and the pantograph support, as spare parts. It is possible to fix the manikin to the workbench using a flange connection (Item code DS0955) or an holdfast connection, showed in the lower picture, (Item code DS1008), or to fix it to the dental chair, using the proper connection. The inner articulator, in metal casting, doesn't allow the lateral movements and it is also available as spare part (Item code DS1009).

Suitable for practice on every mouth model, but particular appropriate for dental hygienist trainings.

**Item code DS1004**



 **Attacco a morsetto**


**Art. Cod. DS1008**

 **Holdfast connection**

**Item code DS1008**




PER MANICHINI SENZA BUSTO  
FOR MANIKINS WITHOUT BUST

 **Attacco a morsetto con asta snodata incorporata**  
**Art. Cod. DS0956**

 **Holdfast connection with incorporated jointed rod**  
**Item code DS0956**



 **Attacco a piastra con asta snodata**  
**Art. Cod. DS0957**

 **Plate connection with jointed rod**  
**Item code DS0957**



 **Attacco a piastra con asta a doppio snodo**  
**Art. Cod. DS0958**

 **Plate connection with double jointed rod**  
**Item code DS0958**



 **Attacco standard con asta con snodo**  
**Art. Cod. DS0943**

 **Standard connection with jointed rod**  
**Item code DS0943**



PER MANICHINI CON BUSTO  
FOR MANIKINS WITH BUST

 **Attacco a morsetto con asta snodata incorporata per manichino con busto**

Si applica in un alloggiamento a vite opportunamente predisposto. Consente libertà di orientamento e il fissaggio in una posizione parallela al piano di aggancio.

**Art. Cod. DS0976**

 **Holdfast connection with incorporated jointed rod for manikin with bust**

It is set into an especially provided screw slot. It enables freedom in orientation and the fixing in a stance parallel to the connection bench.

**Item code DS0976**



 **Attacco con snodo per manichini con busto**

Si applica in un apposito alloggiamento a vite predisposto sotto al busto e ne consente contemporaneamente sia il fissaggio che la libertà di movimento.

**Art. Cod. DS0944**

 **Holdfast connection for manikin with bust**

It is set into an especially provided screw slot under the bust and it enables at the same time its fixing and the freedom of movements.

**Item code DS0944**





#### Attacco a flangia

Consente di fissare i manichini alle superfici, di vario spessore, dei piani in metallo o in legno dei banchi di lavoro.

**Art. Cod. DS0955**

#### Flange connection

It enables to fix the manikins to the surfaces, with different thickness, of the metal or wooden boards of the workbenches.

**Item code DS0955**



#### Supporto a slitta

Dotato di asta di scorrimento per la regolazione dell'altezza, di due piastre sagomate di aggancio e di una prolunga per lo sbracciamento dell'asta con snodo, si può applicare a qualsiasi superficie piana.

**Art. Cod. DS0945**

#### Slide support

Equipped with a sliding rod for height regulation, with two shaped connection plates and an extension for the movement of the jointed rod, it can be fixed anywhere there are level surfaces.

**Item code DS0945**



#### Piccola asta di supporto, con canotto dotato di fibbie e cinghia, per applicare il manichino con busto alle poltrone odontoiatriche

Si applica alla base del busto che, a sua volta è dotato di due fibbie laterali. Il sistema consente di bloccare il manichino alla poltrona.

**Art. Cod. DS0948**

#### Small support rod, with a dinghy equipped with buckles and belts, to apply the manikin with bust to the dental chair

It is applied at the base of the bust which is itself equipped with two side buckles, which enables to fix it to the chair.

**Item code DS0948**



#### Doppio supporto a canotto con fibbie e cinghie per applicare il manichino senza busto alla poltrona odontoiatrica


I canotti sono dotati di viti per il blocco dello scorrimento.


**Art. Cod. DS0949**

#### Double dinghy support with buckles and belts to apply the manikin without bust to the dental chair

The dinghies are equipped with sliding block screws.

**Item code DS0949**

 I nostri manichini e i relativi accessori sono abbinabili a qualsiasi banco odontotecnico o costruito appositamente. Possono essere completati da accessori informatici quali monitor, personal computer, lettori DVD, telecamere endorali e via dicendo. Per i suddetti accessori, se non di dotazione, si effettuano preventivi su richiesta.

 Our manikins and relating accessories match with every dental workbench or with workbench specifically manufactured. They can be equipped with hardware, such as monitors, personal computers, DVD players, endoral cameras and so on. For these devices, if not supplied, we are ready to give a price estimate on request.



 **Modello “SIMPLEX”**

Può essere fornito anche nella versione con la lampada a led. Manichino escluso, è composto da un banco di lavoro con il piano prolungato, una cassetiera a tre cassetti, una lampada scialitica a luce orientabile con palo di sostegno, un miniriunito pneumatico a cordini pendenti con due strumenti (turbina e micromotore) più la siringa a tre vie, un braccetto a pantografo di sostegno per il miniriunito e il contenitore dell'acqua pressurizzata, un pedale di comando del miniriunito e una piastra di supporto e di sostegno del manichino.

**Art. Cod. DS0997**

 **“SIMPLEX” Model**

It can also be supplied with the led lamp. Manikin not included, it consists of an extended table-top workbench, three drawers cabinet, adjustable lightening scalytic lamp with bearing rod, a pneumatic mini-unit, hanging cords system, with two instruments (turbine drill and micro-motor), plus the three way syringe, a pantograph bearing holder of the mini-unit and the pressurized water container, a control pedal of the mini-unit and a support and bearing plate for the manikin.

**Item code DS0997**

 **Modello “MEDIUM”**

Manichino escluso, è composto da un banco da lavoro con cassetiera a tre cassetti e cassetiera laterale con quadro di comando, una lampada scialitica a luce orientabile con palo di sostegno a braccio a pantografo, un carter di mascheramento del contenitore dell'acqua pressurizzata, un miniriunito pneumatico a cordini pendenti con due strumenti (turbina e micromotore) più la siringa a tre vie, un palo con braccio a pantografo di sostegno per il miniriunito, un pedale di comando e una piastra di supporto e di sostegno del manichino.

**Art. Cod. DS0993**

 **“MEDIUM” Model**

Manikin not included, it consists of a workbench with three drawers cabinet and lateral drawing cabinet with control panel, an adjustable lightening scalytic lamp with pantograph arm on bearing rod, screen guard for the pressurized water container, a pneumatic mini-unit, hanging cords system, with two instruments (turbine drill and micro-motor), plus the three way syringe, a rod with pantograph bearing arm of the mini-unit, a control pedal of the mini-unit and a support and bearing plate for the manikin.

**Item code DS0993**





### Modello "SUPER"

Manichino escluso, è composto da banco di lavoro con cassettera a due ampi cassetti nella quale trovano sede l'alloggiamento per la pistola per l'aria opzionale, il palo di sostegno per tutte le strutture aeree, la lampada scialitica a luce orientabile con supporto a braccio pantografo, il supporto con il contenitore dell'acqua pressurizzata, il supporto per il monitor e il relativo monitor, il miniriunito pneumatico con braccetti a "sprido" con supporto a braccio pantografo e con due strumenti (turbina e micromotore) più la siringa a tre vie, il pedale di comando per il suddetto, il prolungamento del piano di lavoro sotto il quale trova alloggio il supporto del sostegno del manichino accessorabile con telecamera endorale. È possibile interconnettere le varie postazioni con quella del relatore e tra loro.

**Art. Cod. DS1400**

### "SUPER" Model

Manikin not included, it consists of a workbench with two very large drawers cabinet that contain the housing for the optional dental air compressor, the bearing rod for all the aerial structures, the adjustable lightening scialytic lamp with pantograph arm on bearing rod, the support for pressurized water container, the monitor and its support, the pneumatic mini-unit with "sprido" holders with pantograph bearing arm and with two instruments (turbine drill and micro-motor), plus the three way syringe, the control pedal, the extension of the workbench, under which is housed the manikin bearing support eventually equipped with endoral camera. It's possible to connect every station with the others and with the tutor station.

**Item code DS1400**

### Modello "EXTRA"

Del tutto analogo al modello "super", è differente solo nel banco che è provvisto di un top più largo, di spallette portanti laterali e di fondo chiuse, di pedana, di supporti porta-micromotore e porta spatola elettrica e di stock di aspirazione con schermo protettivo.

In questo modello la lampada scialitica può essere sostituita da una lampada a led a 6.000 K, la centralina pneumatica a cordoni sospesi con altro modello di centralina e il monitor non essere fornito di dotazione. I preventivi per le varianti si effettuano su richiesta.

**Art. Cod. DS1401**

### "EXTRA" Model

Almost similar to the "super" model, it only differs in the workbench that is equipped with a larger top, closed lateral and back panels, platform, micro-motor and electric spatula bearing supports, and suction stock with protective screen.

In this model the scialytic lamp can be replaced by a led lamp 6000k, the pneumatic mini-unit with hanging cords system by another mini-unit model and the monitor can be an optional. Price estimates for the variations are available on request.

**Art. Cod. DS1401**



**Poltrona simulatrice modello "SUPERIOR"**

Certificata ISO 9001, viene fornita corredata da manichino autodrenante con articolatore a slitta (art. cod. DS0954), lampada scialitica montata su palo, sistema di filtraggio dell'acqua, aspiratore chirurgico dal lato dell'assistente, ampia tavoletta su braccio pantografo con faretra a cordoni pendenti dotata di stringa a tre vie e due strumenti di base, sistema di raccolta degli scarti accessibile dall'esterno, bottiglia di contenimento e di carico dell'acqua anch'essa esterna, comando a pedale degli strumenti e doppio comando, sia a pedale sul basamento, sia manuale sulla consolle, per la regolazione in altezza della posizione del busto con il manichino.

**Art. Cod. DS1082**

**Simulator dental chair "SUPERIOR" model**

Certified ISO 9001, it is supplied with self-draining sledge articulator manikin (Item code DS0954), scialytic lamp mounted on rod, clean water system, surgery vacuum by the assistant side, large tablet mounted on pantograph arm with hanging cords quiver, equipped with three way syringe and two basilar instruments, ejection collecting system and water filling bottle, both exterior reachable, instrument command pedal and double command by pedal on the base or by manual switch on the console to adjust the height of manikin bust.

**Item code DS1082**

**Accessori opzionali**

– Braccetto portamonitor e monitor

**Art. Cod. DS1083**

– Telecamera endoorale e cablaggio di collegamento al monitor

**Art. Cod. DS1084**

– Regolatore di velocità del micromotore

**Art. Cod. DS1085**

– Lampada fotopolimerizzante e cablaggio della relativa scheda elettronica

**Art. Cod. DS1086**

– Apparecchio per ultrasuoni per la detartrasi e cablaggio della relativa scheda elettronica

**Art. Cod. DS1087**

– Estensione della faretra portastrumenti a sei unità

**Art. Cod. DS1088**

**Optional accessories**

– Monitor holder and monitor

**Item code DS1083**

– Endoral camera and monitor wiring connection

**Item code DS1084**

– Micro-motor speed control

**Item code DS1085**

– Curing Light and wiring of its electronic card

**Item code DS1086**


– Ultrasonic scaling device and wiring of its electronic card

**Item code DS1087**


– Extension of instrument-support quiver to six elements

**Item code DS1088**




 Centralina pneumatica con riserva d'acqua incorporata, di tipo economico e a due strumenti, comprensiva del pedale di comando

**Art. Cod. DS1089**


 Cheap type pneumatic control unit for two instruments, water reserve embodied, foot control included.

**Item code DS1089**




 Centralina pneumatica con bottiglia di riserva d'acqua esterna, a cordoni pendenti e a tre strumenti, comprensiva del pedale di comando.

**Art. Cod. DS1090**


 Pneumatic control unit with external water reserve, hanging cords system, for three instruments, foot control included.

**Item code DS1090**



 Centralina pneumatica con bottiglia di riserva d'acqua esterna, con cordoni sospesi a ritorno automatico (sistema sprido) e a tre strumenti, comprensiva del pedale di comando

**Art. Cod. DS1091**

 Pneumatic control unit with external water reserve, automatic running back hanging cords (sprido system), for three instruments, foot control included.

**Item code DS1091**



**Supporto da banco di lavoro per centraline pneumatiche sospese**

Esiste nelle due versioni:  
 con attacco a flangia (*come raffigurata*)

**Art. Cod. DS1095**

con attacco a morsetto (*vedi pag M8*)

**Art. Cod. DS1096**

**Workbench support for suspended pneumatic mini-units.**

It exists in two versions:  
 With flange connection (*as shown*)

**Item code DS1095**

With holdfast connection (*see p. M8*)

**Item code DS1096**

**Supporto da banco di lavoro per centralina pneumatica a cordoni sospesi**

Esiste nelle due versioni:  
 con attacco a flangia (*come raffigurata*)

**Art. Cod. DS1093**

con attacco a morsetto (*vedi pag M8*)

**Art. Cod. DS1094**

**Workbench support for hanging cords pneumatic mini-units.**

It exists in two versions:  
 With flange connection (*as shown*)

**Item code DS1093**

With holdfast connection (*see p. M8*)

**Item code DS1094**



**Controllo a pedale per mini-riuniti pneumatici**

**Art. Cod. DS1092**

**Foot control for pneumatic mini-units.**

**Item code DS1092**



**Centrale di controllo pneumatica multifunzione**

Servo-mobile con cassetiera, alimentato anche elettricamente a cui può essere abbinato qualsiasi manichino di nostra produzione con gli adeguati supporti. È corredato di siringa a tre vie, manipolo ad alta velocità, manipolo a bassa velocità, lampada fotopolimerizzante, ablatore ultrasonico, aspirazione e di tutti i relativi strumenti.

**Art. Cod. DS1097**

**Multifunctional pneumatic control unit**

Roll unit with drawers cabinet, also electronic powered, that can be matched with every type of our manufactured manikins by means of the appropriate supports. It is equipped with 3 way syringe, high speed handpiece, low speed handpiece, led curing light, ultrasonic scaler, suction and with all the pertinent instruments.

**Item code DS1097**



 **Turbina monouso**

**Art. Cod. DS1201**

 **Disposable turbine**

**Item code DS1201**

 **Turbina con push**


**Art. Cod. DS1202**

 **Push turbine**

**Item code DS1202**

 **Manipolo dritto per chirurgia**

**Art. Cod. DS1203**

 **Straight handpiece for surgery**

**Item code DS1203**

 **Micromotore**

**Art. Cod. DS1204**

 **Micro-motor**

**Item code DS1204**

 **Contrangolo anello blu**

**Art. Cod. DS1205**

 **Contra-angle blue ring**

**Item code DS1205**



 **Lampada a led orientabile su supporto snodato**

**Art. Cod. DS1206**

 **Adjustable led lamp on jointed support**

**Item code DS1206**



 **Ablatore ultrasonico**

*Disponibili a parte serbatoio e luce incorporata*

**Art. Cod. DS1207**

 **Ultrasonic scaler**

*Tank and incorporated light are available separately*

**Item code DS1207**



 **Lampada fotopolimerizzante**

*Intensità della luce 1.200 mW/m2*

**Art. Cod. DS1208**

 **Led curing light**

*Light intensity 1200 mW/m2*

**Item code DS1208**